

Rotaflow II

GETINGE 

Quick guide for General Information

(1) Rotaflow II 외관 / 버튼



- [1] LED speed indicator
- [2] Emergency button (3초간 동시에 눌러야 작동)
- [3] Power supply indicator (LED)
- [4] On/ Off LED & button
- [5] Lock/ Unlock LED & button
- [6] Rotary Knob (RPM controller)



(2) User Interface / Intervention (중재 기능)

알람이 울릴 때, 상단바를 눌러보세요.

Intervention, 중재란?

사용자의 설정.

- [1] Zero flow
: 정맥 버블 센서에서 공기를 감지할 때 ON
- [2] Pump stop
: 동맥 유량/버블센서에서 공기를 감지할 때 ON
- [3] Backflow Prevention
: 환자 혈압이 펌프의 속도보다 높아 반대방향으로 혈류가 흐를 때 ON



- [1] Silence 음소거
- [2] Setting 변경 : 날짜, 시간, 밝기
- [3] Wizard 마법사
- [4] Alarm review
- [5] 충전상태/ 잔여시간

(3) Wizard Function (마법사)

※ RPM이 0일 때만 보기가 가능합니다

다음과 같은 상황에서 도움을 받으실 수 있습니다.

- Setting up the device
- Connecting the PLS set
- Filling the PLS set
- Function test



간편한 구성



Fixation Point ↗

← Compact Holder

(4) Global Override ('알람/중재 무시' 기능)



: Wizard 기능 사용 시, 자동으로 설정되며 Priming단계에서만 활용하실 수 있습니다. (안전상, RPM 0일 경우에만)



■ 노란색 부분을 조작하세요!

Rotaflow II

GETINGE 

Troubleshooting

알람이 울릴 때, 상단바를 눌러보세요. 

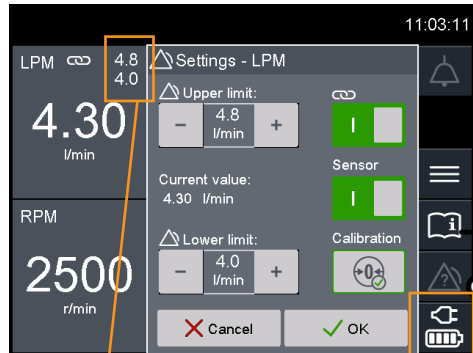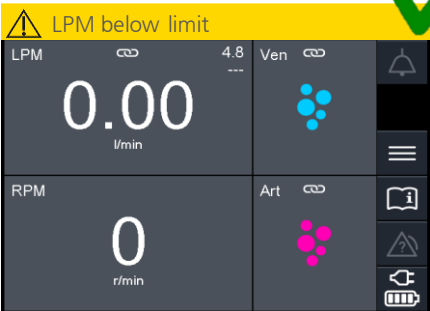

최근 알람 6개를
우선순위에 따라
다시 확인하세요!



Clinical Alarms

LPM below limit

(가능한 원인) 펌프 정지, RPM 세팅 너무 낮음, circuit occlusion
(해결 방법) RPM을 조절, occlusion 제거, 필요 시 volume status를 확인, flow bubble sensor가 올바른 방향으로 정위치에 장착되었는지 확인, 알람 범위 재설정 등등

Arterial bubble detected

(가능한 원인) 펌프 정지, 동맥 튜브라인에 공기
(해결 방법) 동맥과 정맥 튜브라인을 클램프하고, 세트를 교체하면서 bubble sensor를 reset하고 RPM을 재조절함

Venous bubble detected

(가능한 원인) 펌프 정지, 정맥 튜브라인에 공기
(해결 방법) 동맥과 정맥 튜브라인을 클램프하고, De-air한 뒤, bubble sensor를 reset하고 RPM을 재조절함

Backflow prevention

(가능한 원인) 흐름 정지
(해결 방법) RPM을 올려 필요한만큼 설정함

Drive defective - stop

(가능한 원인) 펌프 정지
(해결 방법) Emergency drive를 사용하며 대체 drive를 준비함

Incorrect flow sensor direction

(가능한 원인) 센서 방향이 반대로 되어있거나 calibration이 시행되지 않음
(해결 방법) 필요하다면 '중재'기능을 끈 후, 화살표 방향으로 flow sensor를 다시 연결함, calibration을 재시행 후 RPM을 조절함

Flow limit 설정, 첫 화면에/ 한 눈에!

- Upper limit
- Lower limit

배터리 잔량, 배터리 상태도 같이 확인하세요

(우측 상단 LED불빛으로도 가능)



알람의 종류는 두 가지 색으로 구분됩니다

High- priority alarm

: 바로 중재하지 않으면 심각한 Damage가 생기는 알람

Medium/low-priority alarm

: 중등도의 Damage가 생길 수 있거나 해결하지 않을 경우 추후 계속 체외순환을 할 때 문제가 생길 수 있음

Battery very low

(해결 방법) 메인 전압 케이블을 연결하고, emergency drive를 준비해야함

Control unit restarted

(가능한 원인) 시스템 불안정
(해결 방법) 알람 범위와 중재를 확인 한 뒤 필요할 시 "Emergency mode"를 준비, 가능한 Rotaflow II를 대체하고 technician 호출

Remaining battery capacity <20%

(해결 방법) 메인 전압 케이블을 연결하기

Switch to battery operation

(해결 방법) 메인 전압 케이블을 연결하고, 배터리 상태 확인 및 점검하기

Drive reconnected

(해결 방법) 알람 확인 누르기

