

Rotaflow II system(RFC2)

PLS system

(주)한솔카디악케어 하재훈

Rotaflow2(RFC2) - 구성품



- 1 Rotaflow2 console
- 2 Rotaflow2 drive
- 3 Fixation point
- 4 Emergency drive
- 5 Sensor(Artery, vein)
- 6 Heater Unit
- 7 Gas blender

Rotaflow2(RFC2) - 이전 장비와 외관 비교



기존 모델 대비 -8kg 감소



원내 이송에 적합하도록 간편한 구성

Rotaflow2(RFC2)



기존 소모품 (PLS set) 호환가능




초음파 크림 불필요



기존 모델 대비 간단한 UI 와 버튼

батери 완전 충전 시 90 분 사용가능

Rotaflow2(RFC2)

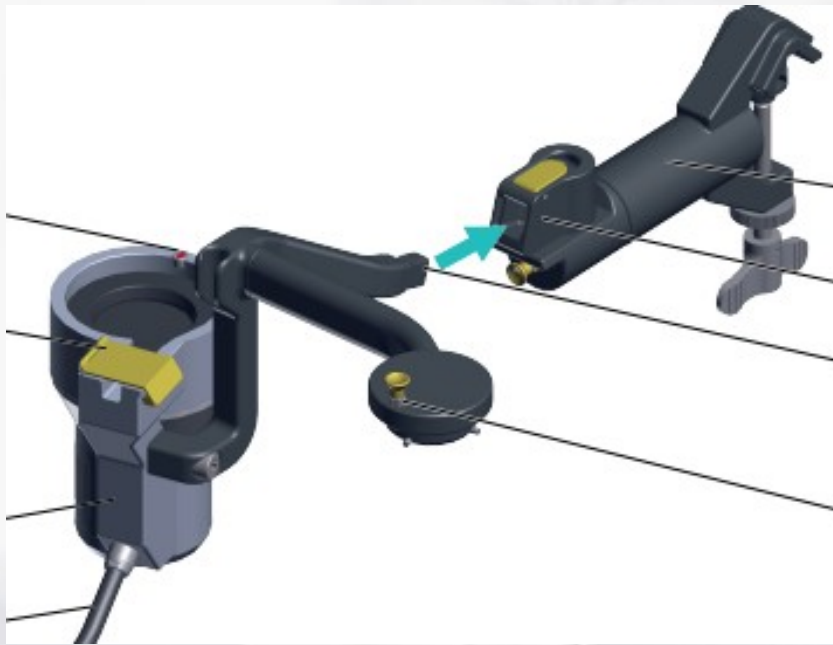

* Pump 와 Oxygenator 일체형으로 변경 되었으며 , console 과 연결하여 이동 가능 .

Rotaflow2(RFC2)



Rotaflow2(RFC2)



- 1 속도 표시기(LED)
- 3 컴팩트 홀더용 결합점



- 2 이동 핸들

Rotaflow2(RFC2)



- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 제어판 | 2 | 터치스크린 |
| 3 | 배터리 표시기(LED) | 4 | 전원 공급장치 표시기(LED) |
| 5 | [켜기/끄기](LED 및 버튼) | 6 | [잠금/잠금 해제](LED 및 버튼) * 3 분 자동 잠금 |
| 7 | 회전식 조절기 | 8 | 환기구 |

Rotaflow2(RFC2) - 후면

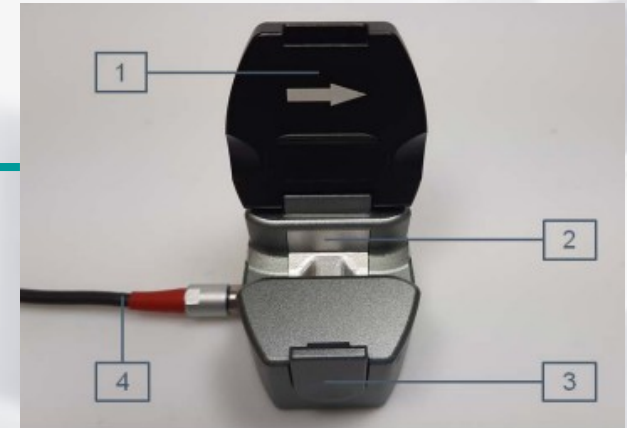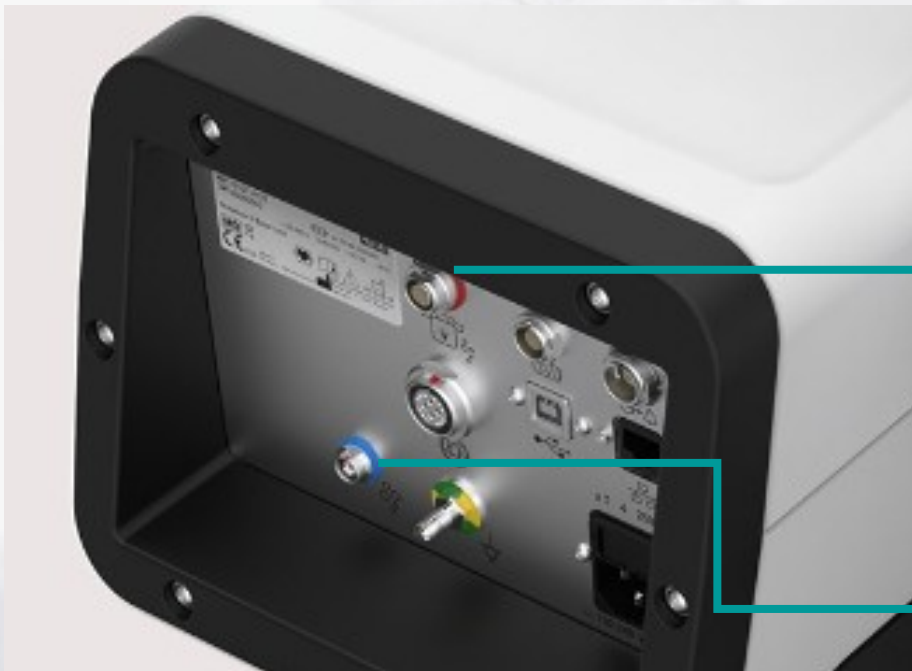

Flow bubble sensor(Arterial)



Bubble sensor(Venous)

Rotaflow2(RFC2)




- | | | | |
|----|----------------|----|--------------------|
| 1 | [RPM 값](속도 제어) | 2 | [동맥 흐름/버블 모니터링] |
| 3 | [LPM 값] | 4 | [경보 상한 및 하한] |
| 5 | [조정] | 6 | [경보 음소거] * 60 초 지속 |
| 7 | [정맥 버블 모니터링] | 8 | [메뉴] |
| 9 | [마법사] | 10 | [경보 목록] |
| 11 | [배터리 상태] | | |

Rotaflow2(RFC2)




- LPM 창 클릭 시 팝업창

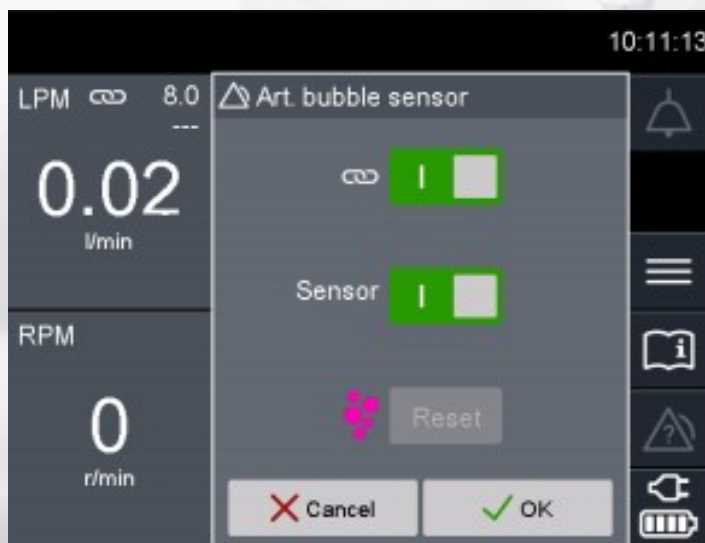

- sensor 창 클릭 시 팝업창

Rotaflow2(RFC2) - Intervention

Intervention

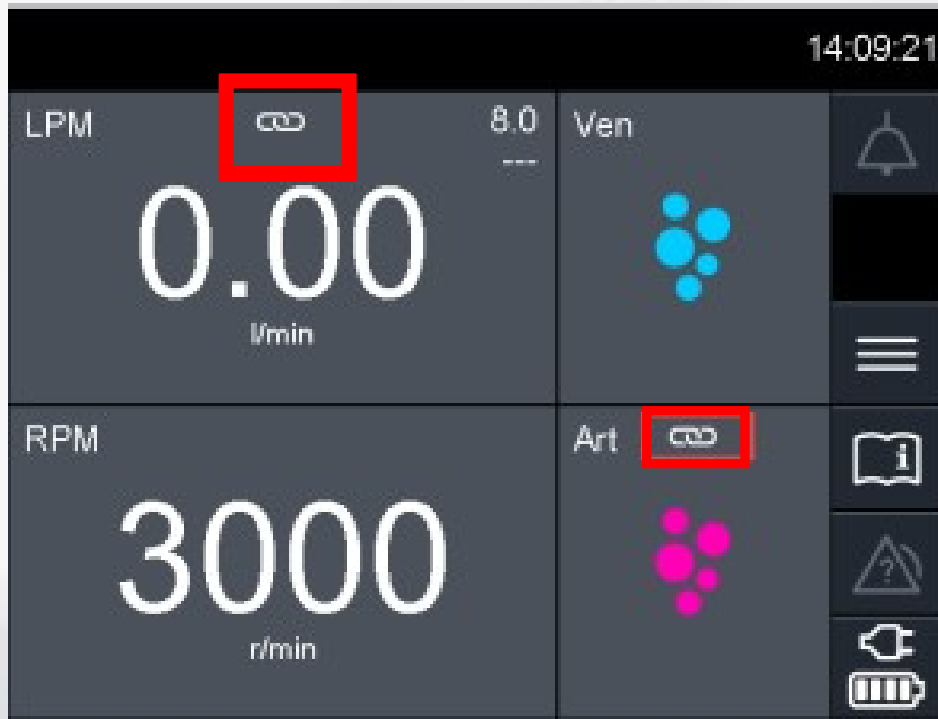

- Intervention 활성화 시

Flow bubble sensor(Artery)

- bubble 측정 시 pump **stop**

- back flow 3 초 지속 시 LPM 0 유지


bubble sensor(Vein)

- bubble 측정 시 LPM 0 유지

- Intervention 비활성화 시

알람만 울리고 action 없음

Rotaflow2(RFC2)

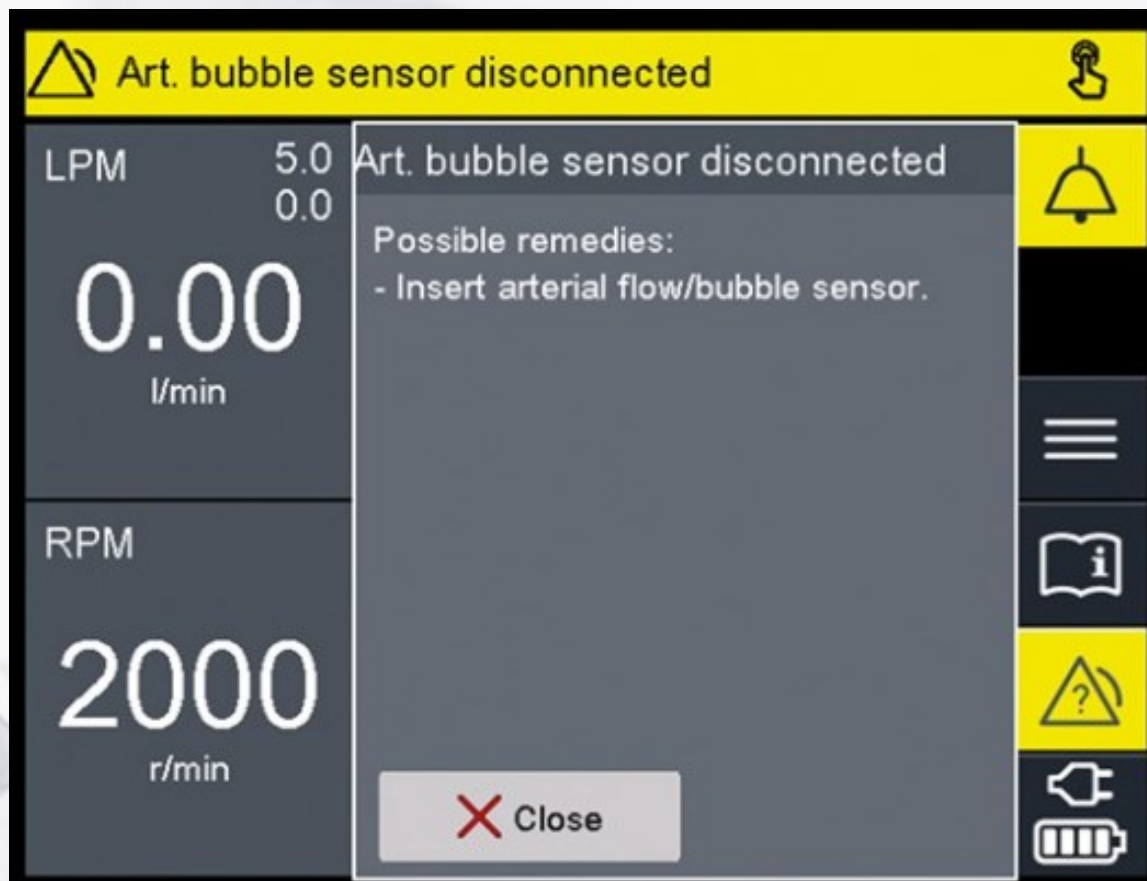

- Error 발생 시 상단바 클릭 시 팝업창으로 Error 발생 내용 관련 확인 가능


Rotaflow2(RFC2) - Wizard(설명서)



도움말 기능 (Help) 제공

-Priming 시 단계별 안내와 Support 제공

Rotaflow2(RFC2) – battery

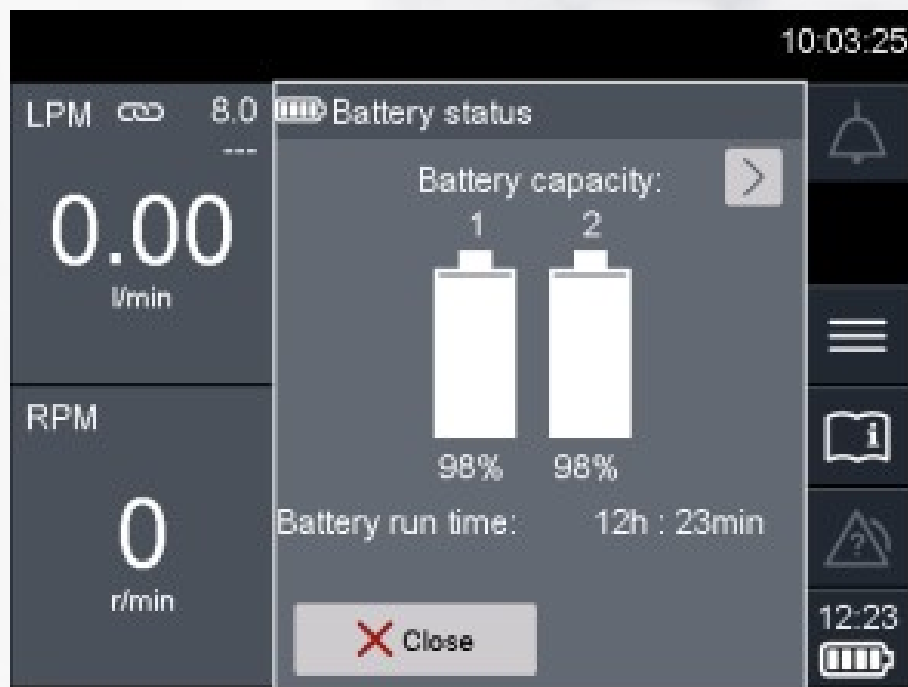

• Battery 사용 시

- 1) Battery 는 2 개의 리튬이온 전지로 구성되어있으며 , 최소 90 분 운용 가능해야 됨 .
- 2) 최대 4 년마다 2 개 전부 교체 권장



• 벽전원 사용 시

Rotaflow2(RFC2) - 설정



• PW : 171178

Rotaflow2(RFC2) – Battery Calibration

배터리 보정

 보정에는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

▶ Rotaflow II가 켜져 있습니다.

1. 탐색 모음에서 [메뉴] > [서비스] > [병원]  버튼을 선택합니다.
 2. 암호(PIN)를 입력하고 입력을 확인합니다.
 3. [배터리 보정]  버튼을 선택합니다.
 4. 배터리 상태는 보정 상태와 함께 표시됩니다.
 5. 보정이 필요하면 [보정...] 버튼을 선택합니다.
- ✓ 배터리가 보정되었습니다.

- Full 충전, 방전, Full 충전 진행하여 Battery 보정하는 기능

Rotaflow2(RFC2) – Calibrate touchscreen



- 화면에 X를 눌러 터치 캘리브레이션 진행

Rotaflow2(RFC2) - 장비 종료 방법



- 3 초간 누름 유지하면
종료 팝업창에서 OK 누르기

Rotaflow2(RFC2) – Error

Error message	Possible case	Possible remedies
Device tem.too high	Device temp. > 65도	장비 온도 낮출 필요 있음
Battery 1(2)-no voltage	-	Battery 교체 또는 점검 필요

Rotaflow2(RFC2)



Rotaflow2(RFC2)





Thank you